



Powerology

مدلك علاجي
مع ملحق مقبض التمديد
SKU: PWTMEHA

٢	نظرة عامة على المنتج.....
٢	الميزات.....
٣	رؤوس المنتج.....
٤	وظيفة الأزرار.....
٤	ضبط السرعة.....
٤	واجهة العرض.....
٤	شحن الجهاز.....
٥	المواصفات.....
٦	الضمان.....
٦	اتصل بنا.....

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

» نظرة عامة على المنتج

يعد مسدس التدليك باورولوجي المزود بمقبض تمديد حلاً خفيف الوزن لإزالة كل التوتر العضلي في وقت قصير. يأتي بأربعة رؤوس مختلفة مما يجعله مثاليًا للاستخدام لجميع أجزاء جسمك. تتيح قاعدة المنتج الشحن اللاسلكي. من أجل تلبية جميع أنواع الاحتياجات، تم تصميمه بأربعة أوضاع مختلفة مثل تخفيف الألم والهدوء والطاقة والراحة، ويتم توليدها بسرعات محرك مختلفة من ١٥٠٠ دورة في الدقيقة إلى ٣١٠٠ دورة في الدقيقة.



تم تصميم هذا المنتج بشكل أنيق لسهولة الاستخدام. يتكامل هذا التصميم بسلاسة مع مساحة المعيشة الخاصة بك.




يأتي مع ملحق إضافي لمقبض التمديد للمناطق التي يصعب الوصول إليها.


» الميزات

١. بطارية مدمجة بسعة ٢٢٠٠ مللي أمبير في الساعة
٢. وقت الشحن يبلغ ٤ ساعات
٣. وقت العمل يبلغ ٤ ساعات
٤. قاعدة شحن لاسلكية
٥. أربع سرعات: ١٥٠٠-٣١٠٠ دورة في الدقيقة
٦. مستوى الضوضاء أقل من ٥٥ ديسيبل
٧. شاشة تعمل باللمس بقياس ١,٥٤ بوصة

يأتي هذا المنتج مع مجموعة من أربعة رؤوس فريدة، بما في ذلك القبة والمخروط والإبهام والرأس المزدوج. تم تصميم كل منها لتوفير العلاج الموجه لأجزاء مختلفة من الجسم، مما يضمن الاستخدام الشامل.

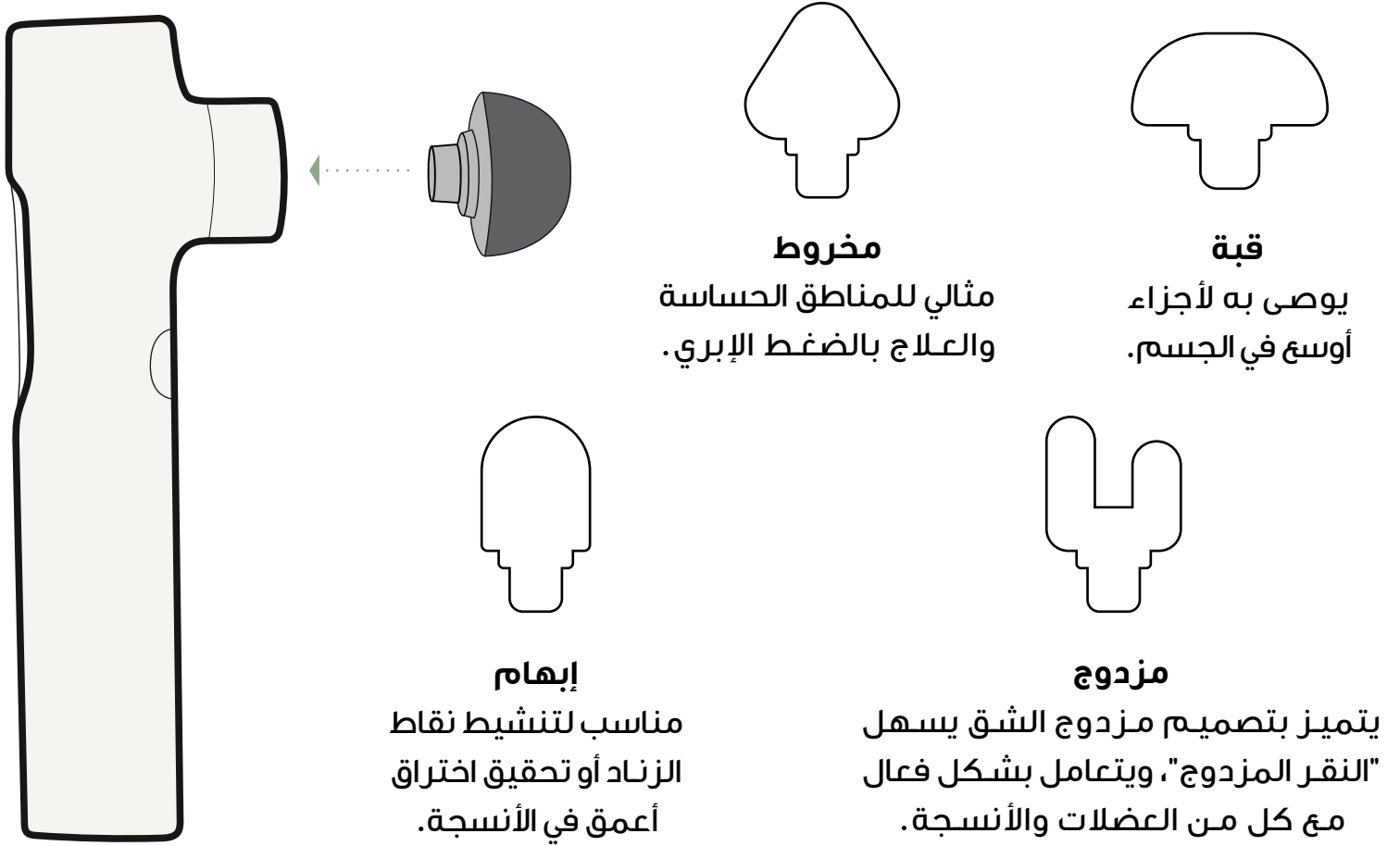


بعد استخدام المنتج، يمكن وضع رأس التدليك بشكل مريح مرة أخرى في القاعدة للاستخدام المستقبلي، كما أنه يسهل الشحن اللاسلكي لمسدس اللفافة.

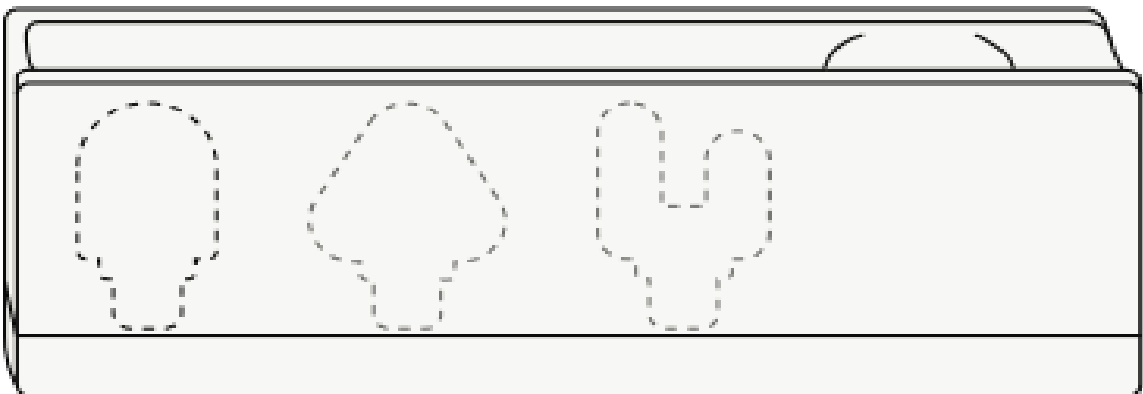

وظيفة الزر


يتميز هذا المنتج بزر واحد لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. لتنشيط الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين. للانتقال إلى القائمة، اضغط على الزر لفترة وجيزة. للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط مع الاستمرار لمدة ٤ ثوانٍ. لإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة ضبطه، اضغط مع الاستمرار لمدة ٨ ثوانٍ.

ضبط السرعة

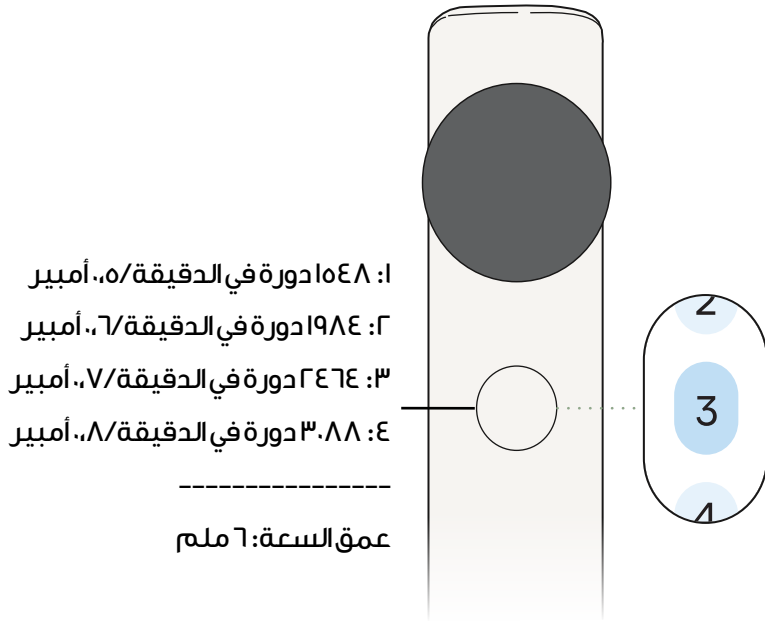

واجهة العرض

تفاعل مع شاشة الجهاز بمجرد تمرير إصبعك لاختيار الميزات المطلوبة.

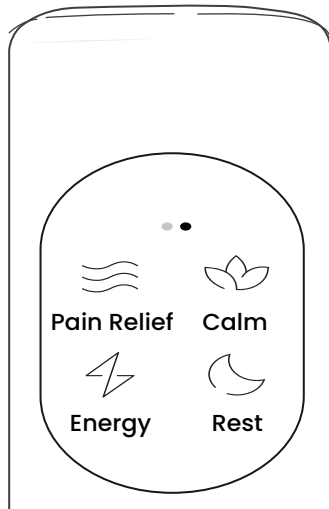

شحن الجهاز

يمكن إعادة شحن هذا المنتج بأحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى: قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ Type-C.

الطريقة الثانية: محطة الإرساء متوافقة مع أجهزة الشحن اللاسلكي.

وتبلغ مدة الشحن باستخدام شاحن من النوع C حوالي ٤ ساعات، بينما يمكن شحن الجهاز بالكامل باستخدام شاحن لاسلكي خلال ١٦ ساعة.

ملحوظة: إذا انخفض مستوى البطارية إلى أقل من ١٠٪، فسيقوم المنتج بتشغيل حماية إيقاف التشغيل التلقائي. قد تظل الشاشة نشطة، ولكن لن يكون من الممكن الوصول إلى وظيفة التدليك وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

المواصفات

نموذج	PWTMEHA
سعة البطارية	٢٢٠٠ مللي أمبير في الساعة / ٧,٤ فولت
نوع البطارية	١٨٦٥٠ IP٢٥ ليثيوم أيون
مدخل محول الطاقة	١٠-٢٤ فولت، ٦/٥٠ هرتز
الطاقة	١٠ واط
مصدر الطاقة	تيار مستمر ٥ فولت/٢ أمبير
السرعة	١٥٠ دورة في الدقيقة إلى ٣١٠ دورة في الدقيقة
الضجيج	أقل من ٥٥ ديسيبل
حجم الشاشة التي تعمل باللمس	١,٥٤ بوصة
المحرك	فرش السيارات
منفذ الشحن	منفذ من النوع C
وقت التفريغ	≤ ٩٠ دقيقة
وقت العمل	حوالي ٤ ساعات (٢-١ مرات في اليوم في الأسبوع)
المواد	PP+ABS + مطاط
حجم الجهاز الرئيسي	٧٢ × ٤٥ × ٢٢٠ ملم
حجم المحطة	٧٠ × ٣٠,٥ × ٢٢٢,٥ ملم
حجم المقبض	٥٥ × ٤٤ × ٢٢٠ ملم
وزن الجهاز الرئيسي	٠,٤٩٥ كجم
وزن المحطة	٠,٢٨٧ كجم
وزن المقبض	٠,٠٨٢ كجم
الوزن الصافي	٠,٨٦٤ كجم
شهادة المنتج	CE

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

فيسبوك: **powerology.ME**