





Powerology

جهاز تدليك سفر صغير جداً


SKU: PSM011

٢	المواصفات
٣	العرض التخطيطي
٤	ملحقات المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٥	تروس التشغيل
٦	تعليمات الشحن
٦	احتياطات السلامة
٧	موانع الاستخدام
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

الرقم الطراز	SM.11
سعة البطارية	٧٥٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	١,٥ ساعة
مدة التشغيل	حتى ٤,٥ ساعة
أقصى طاقة	٤٠ واط
واجهة الشحن	من النوع C
سرعة التروس	من ١٦٠٠ إلى ٢٨٠٠ دورة في الدقيقة
الضربة	٤,٥ مم
وزن المنتج	٢٠٠ غرام
أبعاد المنتج	٩٣,٥ × ٧٦,٣ × ٣٥ مم
مستوى الضوضاء	حوالي ٥٠ ديسيبل
أقصى تيار	٥ أمبير

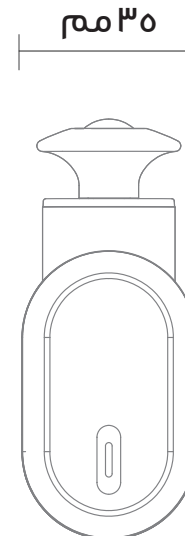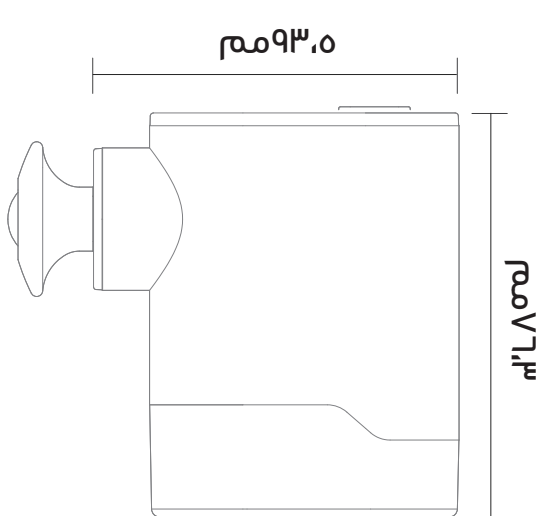

١. رأس تدليك معدني سريع الفك
٢. مقبض
٣. غطاء مطاطي لرأس التدليك
٤. مؤشر التروس
٥. مفتاح التبديل/النقل المركب/مؤشر الطاقة
٦. واجهة شحن من النوع C

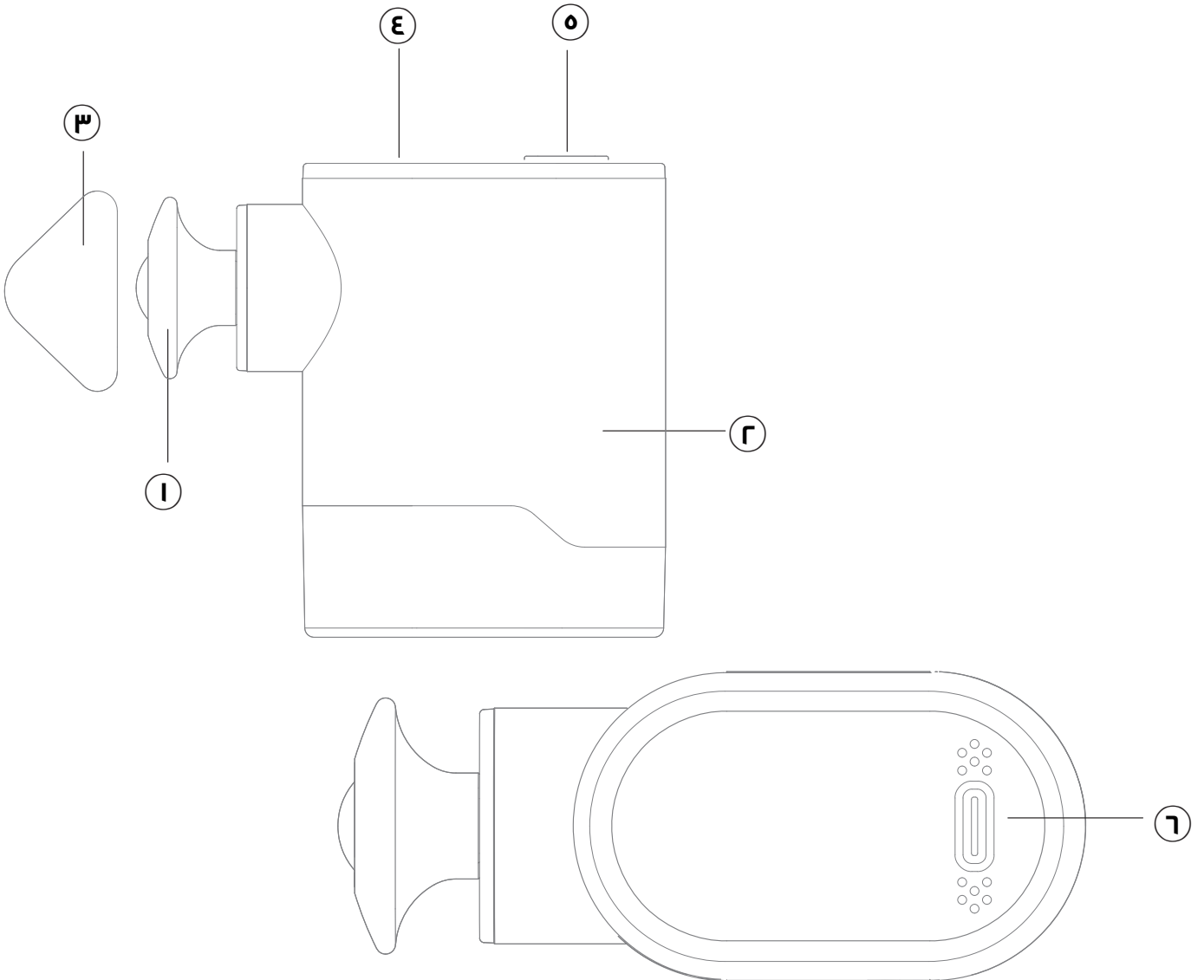

١. رأس تدليك معدني مسطح
٢. رأس تدليك مثلث
٣. رأس تدليك على شكل هامبرغر
٤. رأس تدليك على شكل قبعة من القش
٥. كابل شحن من النوع C



١




٢



٣



٤

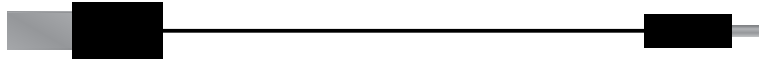

٥

تعليمات الاستخدام

١. تركيب رأس التدليك
- ١.١ يُرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل تركيب رأس التدليك.
- ١.٢ اختر رأس التدليك المناسب.
- ١.٣ أدخل رأس التدليك برفق في مكانه.

٢. التشغيل/الإيقاف

٢.١ للتشغيل: اضغط مطولاً على المفتاح لمدة ١.٢ ثانية تقريباً للدخول إلى الترس ١؛ سيضيئ مؤشر LED الأخضر.

٢.٢ لإيقاف التشغيل: أثناء تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على المفتاح لمدة ١.٢ ثانية تقريباً حتى تنطفئ جميع مؤشرات الجهاز، مما يشير إلى دخوله في وضع إيقاف التشغيل.

٣. وظيفة الإيقاف

٣.١ إذا تجاوز التيار ه أمبير، سيتوقف الجهاز عن العمل ويدخل في وضع الاستعداد مع بقاء مؤشر الترس نشطاً.

٣.٢ لاستئناف التشغيل من الترس الحالي، اضغط مطولاً على المفتاح؛ سيُعاد تشغيل الجهاز بعد دقيقة تقريباً من إيقاف التشغيل التلقائي.

٤. وظيفة التوقيت

٤.١ يعمل الجهاز لمدة ١٠ دقائق تقريباً، ثم يُغلق تلقائياً باستخدام مؤقت.

٤.٢ لإيقاف إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح مرة واحدة لمدة دقيقة واحدة، ثم مرة أخرى لمدة ١٠ دقائق.

٥. وظيفة التحكم في ناقل الحركة

٥.١ لبدء التشغيل على الترس ١، اضغط على المفتاح ضغطة قصيرة لزيادة السرعات.

٥.٢ اضغط على المفتاح ثلاث مرات للعودة إلى الترس ١.

٥.٣ مؤشرات التروس: الترس الأول (أخضر)، الترس الثاني (أحمر)، الترس الثالث (أبيض).

تروس التشغيل

تبدأ الآلة في وضع التشغيل الأولي. للتبديل بين أوضاع التشغيل، المس مفتاح ناقل الحركة للتبديل بين التروس من المنخفض إلى العالي، ثم إلى الوضع المحايد.

- الترس ١٦٠:** دورة واحدة في الدقيقة، مع ضوء LED أبيض - مناسب لإحماء العضلات.
- الترس ٢٢٠:** دورة واحدة في الدقيقة، مع ضوء LED أحمر - مناسب لاسترخاء عضلات اللفافة.
- الترس ٢٨٠:** ٣ دورة في الدقيقة، مع ضوء LED برتقالي - مناسب لإزالة حمض اللاكتيك.

تعليمات الشحن

١. عند عدم كفاية الطاقة، يومض مؤشر الطاقة باللون الأحمر خمس مرات ثم ينطفئ.
٢. أثناء الشحن، يبقى مؤشر الطاقة أحمر.
٣. بعد اكتمال الشحن، يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأزرق.

احتياطات السلامة

١. هذا الجهاز متوافق مع شواحن ه فولت/٢ أمبير أو محولات الشحن السريع الجزئي.
٢. اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز لأول مرة.
٣. تأكد من أن جهد الدخل يطابق جهد المحول قبل الشحن.
٤. لا تُغيّر ملحقات التدليك أثناء تشغيل الجهاز.
٥. لا تغمر المنتج في الماء.
٦. تجنب اهتزاز الرأس أو الفخذ أو الصدر أو أي مناطق أُجريت فيها عمليات جراحية.
٧. لا تستخدم الجهاز كبديل للعلاج الطبي. إذا كنت تعاني من أي ألم أو تخضع لعلاج أو تستخدم أجهزة طبية أخرى، فاستشر أخصائيًا قبل استخدام هذا الجهاز.
٨. في حالة وجود أي عطل، اتصل بفني. لا تحاول تفكيك المنتج بنفسك.

استشيري خبيراً قبل استخدام المنتج إذا كنتِ تعانيين من أيٍّ من الحالات أو المشاكل الصحية التالية:

١. الحمل، أو داء السكري، أو أي مضاعفات مثل تلف الأعصاب أو الشبكية.
٢. وجود جهاز تنظيم ضربات القلب، أو جراحة حديثة، أو الصرع أو الصداع النصفي، أو تدلي القرص الفقري القطني، أو انزياح الفقرات.
٣. الخضوع مؤخراً للجراحة استبدال المفصل، أو تركيب لولب رحمي، أو غرسات معدنية، أو وجود مشاكل صحية أخرى.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)